




VL3R

MILLER 00

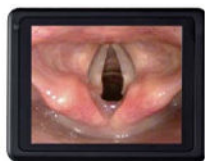

Calidad de la imagen

- Pantalla LCD de alta resolución de ángulo completo de 3.5/4 pulgadas.
- Relación de resolución: 640 * 480RGB/800*480RGB
- Rotación: arriba/abajo: 140° izquierda/derecha: 180°



Funcional

- botón de un clic para fotografía y grabación de video
- tarjeta de memoria de 8G incorporada



Los modelos son completos

- 8 modelos de cuchillas se diseñan para gente de diferentes grupos.

Videolaringscopio Desechable HugaMed

VL3D



Conveniente de enseñar

- Carga y salida de copia de video a través de la interfaz de datos USB
- Pantalla de interfaz HD externa extensible



Ángulo amplio de alta resolución

- Cámara de 2 megapíxeles
- El ángulo de campo es ≥ 60 grados, y el ángulo de la lente es de entre 50° y 60°.



Los modelos son completos

- 5 modelos de cuchillas se diseñan para gente de diferentes grupos

Seguridad

- Lente Antivaho
- Mango Antimicrobiano

Cuchillas desechables

- Paquete estéril
- El diseño de un solo uso evita la Infección Cruzada

Cuchillas reutilizables

- Acero inoxidable de grado médico 316 duradero
- Diseño de grado impermeable IPX8
- A admite la desinfección por inmersión

Más rápido

- Ligero, Portátil
- Instalación e Intubación Más Rápidas
- Extracción Más Rápida de cuchillas o Caída de cuchillas

High-Definition

- La pantalla antirreflectante de 3.5 pulgadas con vista completa es capaz de visualizar con alto rendimiento para cada intubación.
- Vista Mejor: Cámaras de 2.0 Megapíxeles

Más Fácil

- Batería de iones de litio recargable, Botón de Un Disparo para Grabar

Efectivo en Costos

- Cuchillas desechables de bajo coste
- Las cuchillas de acero inoxidable 316 reutilizables se pueden usar 1000 veces.

Especificaciones Técnicas

Pantalla	Tamaño: Vista completa de 3.5 pulgadas. Monitor: LCD Relación de Resolución: 640X480RGB Relación de Aspecto: 4:3 Ratio de actualización de video: 30FPS Iluminación: LED
Salida de datos Salida de imagen	Fácil de crear y almacenar archivos Interfaz USB Relación de Resolución de 2.0M Píxeles
Cámara para la cuchilla del laringoscopio incluye	Ángulo de Campo: 66 ° Iluminancia ≥ 800 LUX
Mango	Mango corto de diseño ergonómico cómodo Batería de Litio Tipo Recargable Tiempo de trabajo prolongado $\geq 120-150$ Minutos
Batería	Tensión de 3.7V Capacidad de 3200mAh Ciclo de Vida de la Batería: Más de 300 veces Tiempo de carga: menos de 4-6 horas